

Nitro[®] Neuro[™] upright walker
Andador vertical Nitro[®] Neuro[™]
Déambulateur Nitro[®] Neuro[™]

item # / N° d'article / artículo #
102663RD



www.drivemedical.com

parts list



WEIGHT CAPACITY: 360 LBS (163 KG)

DO NOT use this product if your body weight exceeds the maximum weight capacity listed for this product.

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Reflector | 11. Seat |
| 2. Hand Grip | 12. Seat Handle |
| 3. Brake Handle | 13. Storage Bag |
| 4. Padded Armrests | 14. Rear Caster |
| 5. Hand Grip Bar Adjustment Knob | 15. Brake Pad |
| 6. Accessory Mount | 16. Resistance Brake |
| 7. Height Adjustment Button | 17. Resistance Brake Adjustment Knob |
| 8. Sit to Stand Handles | |
| 9. Backrest | 18. Bag Mounts (2 locations) |
| 10. Backrest Adjustment Knob | |

Nitro Neuro Upright Walker includes:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Removable Storage Bag | 3. Operating Instructions |
| 2. Backrest | 4. Accessory Mount |

unfolding the Nitro Neuro Upright Walker

To unfold the upright walker, position the Nitro Neuro on all four wheels and ensure all four wheels rest firmly on the ground. Hold each sit to stand handle and pull outward until the Nitro Neuro upright walker unlocks and opens fully (Figure 1). Gently push down on each side of the seat rails near the vertical frame to ensure the unit is fully opened. An audible 'click' confirms that the latches are secure and the seat is fully engaged in a locked position (Figure 2).



assembly instructions

1. Insert the 2 hand grip bars into the designated slots under the padded armrests. Rest your forearms naturally on the padded armrests so they sit flat and relaxed. (Figure 3)
2. Hand grip bar can be moved forward and back to a comfortable length. (Figure 4)
3. The hand grips should be within easy reach, allowing you to hold them without stretching or straining. (Figure 5)
4. The angle of the brake handles can be adjusted left and right to make your grip more comfortable.



assembly instructions continued

- Once you have found a comfortable position, secure the hand grip bar in place by tightening the hand grip bar adjustment knob underneath the tube clockwise. (Figure 6)



This upright walker features a reverse braking mechanism, meaning the brakes are always engaged by default to prevent unintended movement. To move the upright walker, the user must pull or squeeze the brake release handles.

Note: Pulling or engaging one or both brake release handles will unlock or release the brakes, allowing the upright walker to roll freely.

height adjustment

To adjust the handle height, press the height adjustment button and pull the hand grip upward at the same time (Figure 7). Release the button once the desired height is reached. An audible 'click' confirms the handle tube is secure in the locked position. Repeat this process until the desired height is reached for both handles. Refer to the numbering system (Figure 8) to ensure both handles are adjusted to the same height.



backrest adjustment

Turn backrest adjustment knob counterclockwise to loosen. Slide backrest to desired height then turn knob clockwise to tighten. (Figure 9)

DO NOT HANG ANYTHING ON THE BACKREST



walking and braking

The Nitro Neuro upright walker will not roll until you release the brakes.

1. Squeeze the left, right or both brake handles to release the brakes. (Figure 10)
2. Release brake handle(s) to stop. An audible click will indicate that the brakes have been activated upon releasing the brake handle(s).



If more or less resistance is needed to control walking speed, follow these steps to adjust the resistance brake.

1. Locate the resistance brake adjustment knob near the wheel – this controls how much friction is applied to the wheel when walking. (Figure 11)
2. To increase resistance (slower movement), turn the knob clockwise to add additional resistance to the wheel. Adjust both resistance brake knobs to same setting. (See Figure 12)
3. To decrease resistance (faster movement), turn the knob counterclockwise to reduce additional resistance to the wheel. Adjust both resistance brake knobs to same setting. (See Figure 12)



removing / attaching the storage bag

To attach the storage bag to the upright walker, affix the bag mounting clips (located on either side of the storage bag) to the desired mounting points on the upright walker (Figures 13 and 14). Easily remove the storage bag and attach the shoulder strap using the clips located on either side of the storage bag to take it with you on the go. (Figure 15)



**WEIGHT CAPACITY OF THE BAG IS 11 LB.
DO NOT OVERLOAD AS IT WILL AFFECT PERFORMANCE.**

sitting

While facing the upright walker, position the open rollator on a flat, even, solid surface on all four wheels. The brakes are always engaged unless you pull the handle brake release. The upright walker must remain upright and must not move. Utilize the sit to stand handles for support, to turn completely around. With both hands on the handles slowly sit, ensuring you sit straight up and do not lean backwards. (Figure 16).



DO NOT MOVE UPRIGHT WALKER WHILE SEATED.

folding / transport / storage

To fold, pull the seat upward by the seat handle (Figure 17). The upright walker can now be folded completely and secured by pushing the sit to stand handles together. An audible 'click' confirms that the under-seat locking mechanism is engaged and the Nitro Neuro is locked in the folded position (Figure 18).

To transport the rollator, place one hand on the outside of each frame. Lift carefully using proper lifting technique: keep your back straight, bend at the knees, and use your legs to lift.

The rollator weighs approximately 25 lb. Use caution when lifting.



cleaning

Clean regularly by hand with a damp cloth and mild detergent only.

Do not use aggressive detergents such as chlorine, bleach or abrasive cleaners.

maintenance

Drive Medical recommends periodic visual inspection of this product by the user to ensure that all parts and hardware are secure and all components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose. There should be no obstructions or impediments to normal and safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience any problems or issues, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more information.

Periodically inspect the moving components of the Nitro Neuro Upright Walker for signs of wear or damage. On a daily basis, test the braking system to ensure it is functioning properly.

If you experience any issues with wheel resistance, braking performance, or the resistance brake adjustment system, please contact your authorized Drive dealer or Drive customer service for assistance.

Important: Do not pull on the brake cables. Pulling on the cables may cause them to kink, stretch, or become damaged, which could prevent the braking system from operating correctly. Damaged cables should be replaced immediately. If the cabling becomes damaged, discontinue use and contact your authorized Drive dealer or Drive customer service for assistance.

safety instructions

- This is a walking aid only and is not to be used as a transportation device.
- Use only on even and solid surfaces.
- To prevent unintended movement, always maintain control of the upright walker
- The Nitro Neuro upright walker will not roll until you release the brakes.
- Pulling or engaging either brake handle(s) will disengage the brake, allowing the upright walker to roll freely. Ensure the user is prepared and stable before releasing the brake.
- Maximum user weight: 360 lb.
- Regularly check the screws and fasteners on the Nitro Neuro upright walker and retighten if necessary.
- Use bag only for transport of objects and do not overload. Maximum load: 11 lb.
- Do not expose the product to temperatures above 104°F for an extended period as this can cause the Nitro Neuro upright walker parts to overheat and burn the user.

- Please make sure the upright walker is fully opened, seat is down and the folding bar under the seat is locked in the down position before using or sitting in the rollator.
- Be sure both hand grips are at equal heights. Test upright walker for stability before applying full weight to sit to stand handles or armrest and handles.
- Replace casters when significantly worn or damaged.
- The backrest is designed to provide postural support while seated. It is not intended to support the user while standing, or be used to hang any items.
- **DO NOT MOVE UPRIGHT WALKER WHILE SEATED.**
- Consult your physician or healthcare professional before using this product to ensure it is appropriate for your individual needs.

lifetime limited warranty

Your Drive® brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive® device or this warranty, please contact an authorized Drive® dealer.



WARNING: This product can expose you to chemicals, including di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

liste des pièces



POIDS MAXIMAL : 163 KG (360 LB)

N'utilisez PAS ce produit si votre poids corporel dépasse la capacité de poids maximale indiquée pour ce produit.

- | | |
|---|--|
| 1. Réflecteur | 11. Siège |
| 2. Poignée | 12. Poignée de siège |
| 3. Poignée de frein | 13. Sac de rangement |
| 4. Accoudoirs rembourrés | 14. Roulette arrière |
| 5. Bouton de réglage de la barre du poignée | 15. Patin de frein |
| 6. Montage pour accessoire | 16. Frein de résistance |
| 7. Bouton de réglage de la hauteur | 17. Bouton de réglage du frein de résistance |
| 8. Poignées assis-debout | 18. Supports de sac (2 emplacements) |
| 9. Appui-dos | |
| 10. Bouton de réglage de l'appui-dos | |

Le déambulateur Nitro Neuro comprend les éléments suivants :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Sac de rangement amovible | 3. Instructions d'utilisation |
| 2. Appui-dos | 4. Montage pour accessoire |

dépliage du déambulateur Nitro Neuro

Déplier le déambulateur Nitro Neuro en le déposant sur ses quatre roues et en s'assurant que chaque roue repose bien au sol. Tenir chaque poignée assis-debout et tirer vers l'extérieur jusqu'à ce que le déambulateur Nitro Neuro se débloque et s'ouvre complètement. (Figure 1) Appuyer doucement sur chaque côté des rails du siège, près du châssis vertical, pour s'assurer que l'appareil est complètement ouvert. Un « clic » audible confirme que les loquets sont bien fixés et que le siège est entièrement engagé en position verrouillée. (Figure 2)



instructions d'assemblage

1. Insérer les deux barres du poignée dans les fentes prévues à cet effet sous les accoudoirs rembourrés. Poser les avant-bras naturellement sur les accoudoirs rembourrés afin qu'ils soient à plat et détendus. (Figure 3)
2. La barre du poignée peut être déplacée vers l'avant et vers l'arrière pour obtenir une longueur confortable. (Figure 4)
3. Les poignées doivent être à portée de main, ce qui permet de les tenir sans s'étirer ni se fatiguer. (Figure 5)
4. L'angle des poignées de frein peut être réglé à gauche et à droite pour rendre la prise plus confortable.



instructions d'assemblage (suite)

5. Une fois une position confortable trouvée, fixer la barre du poignée en place en serrant dans le sens horaire le bouton de réglage de la barre du poignée, sous le tube. (Figure 6)



Ce déambulateur est doté d'un mécanisme de freinage inversé, ce qui signifie que les freins sont toujours engagés par défaut pour éviter tout mouvement involontaire. Pour déplacer le déambulateur, l'utilisateur doit tirer ou serrer les poignées de déblocage des freins.

Remarque : Tirer ou enclencher une ou les deux poignées de déblocage des freins déverrouille ou relâche les freins, ce qui permet au déambulateur de rouler librement.

réglage de la hauteur

Pour régler la hauteur des poignées, appuyer sur le bouton de réglage de la hauteur et tirer simultanément la poignée vers le haut (Figure 7). Relâcher le bouton une fois que la hauteur est atteinte. Un déclic confirme que le tube de la poignée est bien fixé en position verrouillée. Répéter cette méthode jusqu'à ce que la hauteur voulue soit atteinte pour les deux poignées. Consulter le système de numérotation (Figure 8) et vous assurer que les deux poignées sont à la même hauteur.



réglage de l'appui-dos

Tourner le bouton de réglage de l'appui-dos dans le sens antihoraire pour desserrer. Faire glisser l'appui-dos jusqu'à la hauteur voulue, puis tourner le bouton dans le sens horaire pour le serrer. (Figure 9)



NE RIEN ACCROCHER À L'APPUI-DOS

marche et freinage

Le déambulateur Nitro Neuro ne roule pas tant que les freins ne sont pas relâchés.

1. Serrer les poignées de frein gauche, droite ou les deux pour relâcher les freins. (Figure 10)
2. Relâcher la ou les poignées du frein pour arrêter. Un clic audible indique que les freins ont été activés lors du déblocage de la ou des poignées de frein.



Si une résistance plus ou moins importante est nécessaire pour contrôler la vitesse de marche, suivre ces étapes pour régler le frein de résistance.


1. Localiser le bouton de réglage du frein de résistance près de la roue – cela contrôle la friction appliquée à la roue lors de la marche. (Figure 11)
2. Pour augmenter la résistance (mouvement lent), tourner le bouton dans le sens horaire pour ajouter une résistance supplémentaire à la roue. Régler les deux boutons du frein de résistance au même niveau. (Voir Figure 12)
3. Pour diminuer la résistance (mouvement plus rapide), tourner le bouton dans le sens antihoraire pour réduire la résistance supplémentaire sur la roue. Régler les deux boutons du frein de résistance au même niveau. (Voir Figure 12)



retirer ou fixer le sac de rangement

Pour fixer le sac de rangement au déambulateur, fixer les pinces de montage du sac (situées de chaque côté du sac de rangement) aux points de montage souhaités sur le déambulateur (Figures 13 et 14). Le sac de rangement peut-être facilement retiré et utilisé en bandoulière sur l'épaule à l'aide des attaches situées de chaque côté du sac. (Figure 15)

13

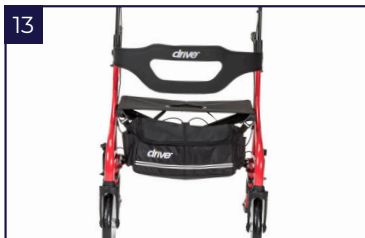


Montage frontal inférieur

14



Montage arrière inférieur

15

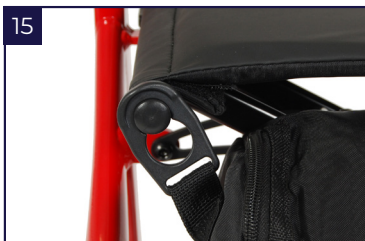

Attache de montage du sac

**CAPACITÉ DE POIDS DU SAC DE 5 KG (11 lb).
NE PAS SURCHARGER, CAR CELA AFFECTERA LES PERFORMANCES.**

s'asseoir

Placer le déambulateur ouvert devant vous, sur une surface stable et plane, bien posé sur ses quatre roues. Les freins sont toujours enclenchés, à moins de tirer sur la poignée de déblocage des freins. Le déambulateur doit rester en position verticale et ne doit pas bouger. Utiliser les poignées assis-à-debout comme support, pour tourner complètement. En gardant les deux mains sur les poignées, s'asseoir lentement, en veillant à rester bien droit et à ne pas pencher vers l'arrière. (Figure 16)



NE PAS DÉPLACER LE DÉAMBULATEUR EN POSITION VERTICALE EN ÉTANT ASSIS.

pliage / transport / rangement

Plier le déambulateur en tirant le siège à la verticale et en utilisant la poignée du siège (Figure 17). Le déambulateur peut désormais être complètement plié et sécurisé en rapprochant les poignées « assis-débout ». Un « clic » audible confirme que le mécanisme de verrouillage sous le siège est engagé et que le système Nitro Neuro est verrouillé en position pliée. (Figure 18)

Pour transporter le déambulateur, placer une main sur l'extérieur de chaque cadre. Soulever avec précaution en utilisant la technique de levage appropriée : garder le dos droit, plier les genoux et prendre l'appui sur les jambes pour soulever. Le déambulateur pèse environ 11 kg (25 lb). Faire preuve de prudence lors du levage.



nettoyage

Nettoyer régulièrement à la main avec un chiffon humide et un détergent doux uniquement.

Ne pas utiliser de détergents agressifs tels que du chlore, de l'eau de Javel ou des nettoyeurs abrasifs.

entretien

Drive Medical recommande à l'utilisateur d'effectuer une inspection visuelle de ce produit pour s'assurer que toutes les pièces et la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état de fonctionnement et qu'ils ne sont pas usés, tordus, effilochés ou lâches. Vérifier régulièrement les vis et les fixations sur le déambulateur Nitro Neuro et les resserrer si nécessaire. Il ne doit y avoir aucun obstacle ou problème empêchant le fonctionnement normal et sécuritaire du produit. Si une pièce ou un mécanisme semble non sécuritaire ou compromis, ne pas utiliser le produit. En cas de difficultés, veuillez communiquer avec le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez le site www.drivemedical.com/help pour obtenir de plus amples renseignements.

Inspecter périodiquement les composants mobiles du déambulateur vertical Nitro Neuro pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Tester quotidiennement le système de freinage pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

Si vous rencontrez des problèmes avec la résistance des roues, les performances de freinage ou le système de réglage des freins de résistance, veuillez communiquer avec votre revendeur Drive autorisé ou le Service à la clientèle de Drive pour obtenir de l'aide.

Important : Ne pas tirer sur les câbles de frein. Tirer sur les câbles peut les plier, les étirer ou les endommager, ce qui pourrait empêcher le système de freinage de fonctionner correctement. Les câbles endommagés doivent être remplacés immédiatement. Si le câblage est endommagé, cesser l'utilisation et communiquer avec votre revendeur Drive autorisé ou le Service à la clientèle de Drive pour obtenir de l'aide.

consignes de sécurité

- Ce produit est uniquement un appareil d'assistance ambulatoire et ne doit pas être utilisé comme appareil de transport.
- Utiliser uniquement sur des surfaces planes et pleines.
- Pour éviter tout mouvement involontaire, toujours garder le contrôle du déambulateur
- Le déambulateur Nitro Neuro ne roule pas tant que les freins ne sont pas relâchés.
- Tirer ou enclencher l'une ou l'autre des poignées de frein relâchera le frein, ce qui permettra au déambulateur de rouler librement. S'assurer que l'utilisateur est préparé et stable avant de relâcher le frein.
- Poids maximal de l'utilisateur : 163 kg (360 lb).
- Vérifier régulièrement les vis et les fixations sur le déambulateur Nitro Neuro et les resserrer si nécessaire.
- Utiliser le sac uniquement pour transporter des objets; ne pas le surcharger.
Charge maximale : 5 kg (11 lb)

- Ne pas exposer le produit à des températures supérieures à 40 °C (104 °F) pendant une période prolongée, car cela pourrait faire chauffer des pièces du déambulateur Nitro Neuro et créer un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- S'assurer que le déambulateur est complètement ouvert, que le siège est abaissé et que la barre de pliage située sous le siège est verrouillée en position abaissée avant de l'utiliser ou de s'y asseoir.
- S'assurer que les deux poignées sont à la même hauteur. Tester la stabilité du déambulateur avant d'appliquer tout votre poids sur les poignées « assis-debout » ou les accoudoirs et poignées.
- Remplacer les roulettes s'ils sont considérablement usés ou endommagés.
- L'appui-dos est conçu pour fournir un soutien postural en position assise. Il n'est pas destiné à soutenir l'utilisateur en position debout, ni à être utilisé pour suspendre des objets.
- **NE PAS DÉPLACER LE DÉAMBULATEUR EN POSITION VERTICALE EN ÉTANT ASSIS.**
- Consulter votre médecin ou votre professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit pour vous assurer qu'il convient à vos besoins individuels.

garantie limitée à vie

Votre produit de marque Drive® est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pour toute sa durée de vie auprès de son propriétaire initial.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et a fait l'objet d'une inspection soignée avant l'expédition. Cette garantie à vie limitée témoigne de la confiance que nous portons aux matériaux et à la main-d'œuvre utilisés pour produire nos appareils afin qu'ils puissent offrir aux consommateurs de nombreuses années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil découlant d'une mauvaise utilisation ou de la négligence du propriétaire, ou de l'usure normale. La garantie ne s'applique pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à l'usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez des questions au sujet de votre appareil Drive® ou de la présente garantie, veuillez communiquer avec un revendeur Drive® autorisé.

lista de piezas



CAPACIDAD DE PESO: 163 KG (360 LB)

NO utilice este producto si su peso corporal excede la capacidad máxima de peso indicada para este producto.

- | | |
|---|--|
| 1. Reflector | 11. Asiento |
| 2. Agarre de mano | 12. Correa del asiento |
| 3. Mango del freno | 13. Bolsa de guardado |
| 4. Apoyabrazos acolchado | 14. Rueda giratoria trasera |
| 5. Perilla de ajuste de la barra del agarre de mano | 15. Pedal de freno |
| 6. Montaje de accesorios | 16. Freno de resistencia |
| 7. Botón de ajuste de la altura | 17. Perilla de ajuste del freno de resistencia |
| 8. Mangos para sentarse y pararse | 18. Montajes de bolsas (2 ubicaciones) |
| 9. Respaldo | |
| 10. Perilla de ajuste del respaldo | |

el andador vertical Nitro Neuro incluye:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Bolsa de guardado extraíble | 3. Instrucciones de funcionamiento |
| 2. Respaldo | 4. Montaje de accesorios |

cómo desplegar el andador vertical Nitro Neuro

Para desplegar el andador vertical, posicione el Nitro Neuro sobre las cuatro ruedas y asegúrese de que todas estén firmemente sobre el suelo. Sostenga cada mango para sentarse y pararse y tire hacia afuera hasta que el andador vertical Nitro Neuro se destrabe y se abra por completo (Figura 1). Empuje suavemente hacia abajo a cada lado de los rieles del asiento cerca del marco vertical para asegurarse de que la unidad esté completamente abierta. Escuchará un clic que confirmará que los pestillos están seguros y que el asiento está completamente acoplado y trabado. (Figura 2)



instrucciones de montaje

1. Inserte las 2 barras del agarre de mano en las ranuras designadas debajo de los apoyabrazos acolchados. Apoye los antebrazos naturalmente sobre los apoyabrazos acolchados para que queden planos y distendidos. (Figura 3)
2. La barra del agarre de mano se puede mover hacia adelante y hacia atrás para que quede a una longitud cómoda. (Figura 4)
3. Los agarres de mano deben estar al alcance de la mano y permitirle sostenerse de ellos sin estirarse ni forzarse. (Figura 5)
4. El ángulo de los mangos de los frenos se puede ajustar hacia la izquierda y hacia la derecha para que su agarre sea más cómodo.



instrucciones de montaje (continuación)

- Una vez que haya encontrado una posición cómoda, asegure la barra del agarre de mano en su lugar apretando la perilla de ajuste de la barra que está debajo del tubo en sentido horario. (Figura 6)



Este andador vertical cuenta con un mecanismo de freno inverso, lo que significa que los frenos siempre están activados de forma predeterminada para evitar movimientos no deseados. Para mover el andador vertical, el usuario debe tirar de los mangos de liberación de los frenos o apretarlos.

Nota: Al activar o tirar de uno o ambos mangos de liberación de los frenos, se desbloquearán o liberarán los frenos, lo que permitirá que el andador vertical se desplace libremente.

ajuste de la altura


Para ajustar la altura del mango, empuje el botón de ajuste de la altura y tire del agarre de mano hacia arriba al mismo tiempo (Figura 7). Suelte el botón una vez alcanzada la altura deseada. Cuando escuche un clic, sabrá que el tubo del mango está asegurado en la posición deseada. Repita este proceso hasta alcanzar la altura deseada en ambos mangos. Consulte el sistema de numeración (Figura 8) para asegurarse de que ambos mangos estén a la misma altura.



ajuste del respaldo

Gire la perilla de ajuste del respaldo en sentido antihorario para aflojarlo. Deslice el respaldo hasta la altura deseada y luego gire la perilla en sentido horario para ajustarlo. (Figura 9)

NO CUELQUE NADA EN EL RESPALDO

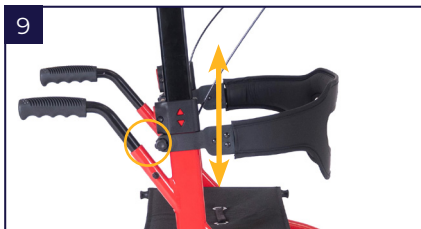

marcha y frenado

El andador vertical Nitro Neuro no avanzará hasta que usted no suelte los frenos.

1. Apriete el mango izquierdo, el derecho o ambos para liberar los frenos. (Figura 10)
2. Suelte los mangos de los frenos para detenerse. Escuchará un clic que indicará que los frenos se han activado al soltar los mangos.



Si se necesita más o menos resistencia para controlar la velocidad de marcha, siga estos pasos para ajustar el freno de resistencia.


1. Ubique la perilla de ajuste del freno de resistencia, que está cerca de la rueda, y controla cuánta fricción se aplica a la rueda al caminar. (Figura 11)
2. Para aumentar la resistencia (movimiento más lento), gire la perilla en el sentido horario para agregar más resistencia a la rueda. Ajuste ambas perillas del freno de resistencia de modo que queden en la misma posición. (Consulte la Figura 12)
3. Para disminuir la resistencia (movimiento más rápido), gire la perilla en sentido antihorario para reducir la resistencia adicional de la rueda. Ajuste ambas perillas del freno de resistencia de modo que queden en la misma posición. (Consulte la Figura 12)



cómo extraer o colocar la bolsa de almacenamiento

Para colocar la bolsa de almacenamiento en el andador vertical, fije las trabas de montaje de la bolsa (ubicadas a ambos lados de la bolsa de almacenamiento) en los puntos de montaje deseados del andador vertical (Figuras 13 y 14). Extraiga la bolsa de almacenamiento con facilidad y coloque la correa para hombro mediante las trabas ubicadas a ambos lados de la bolsa de almacenamiento para llevarla consigo durante la marcha. (Figura 15)

13

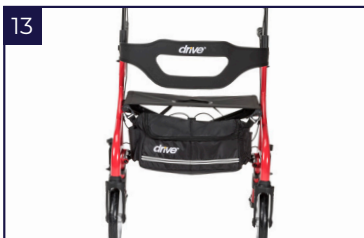


Montaje inferior delantero

14



Montaje inferior trasero

15

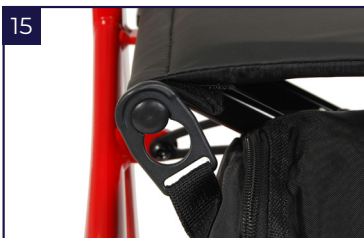

Traba de montaje de la bolsa

**LA CAPACIDAD DE PESO DE LAS BOLSAS ES DE 11 lb (5 kg).
NO LA SOBRECARGUE, YA QUE AFECTARÁ EL RENDIMIENTO.**

cómo sentarse

Póngase de frente al andador vertical abierto y colóquelo sobre una superficie plana, pareja y sólida apoyado en las cuatro ruedas. Los frenos siempre están activados a menos que tire de sus mangos de liberación. El andador vertical debe permanecer erguido y no debe moverse. Utilice los mangos para sentarse y pararse como apoyo para girar por completo. Con ambas manos en los mangos, siéntese lentamente, asegurándose de sentarse erguido y sin inclinarse hacia atrás. (Figura 16)



NO MUEVA EL ANDADOR VERTICAL MIENTRAS ESTÉ SENTADO.

plegado/transporte/almacenamiento

Para plegarlo, tire del asiento hacia arriba utilizando la correa del asiento (Figura 17). Ahora puede plegar el andador vertical por completo y asegurarlo juntando los mangos para sentarse y pararse. Cuando escuche un clic, sabrá que el mecanismo de bloqueo debajo del asiento está activado y que el Nitro Neuro está bloqueado en la posición plegada. (Figura 18)

Para transportar el andador, coloque una mano en el exterior de cada armazón. Levante con cuidado utilizando la técnica de levantamiento adecuada: mantenga la espalda recta, doble las rodillas y use las piernas para levantar. El andador pesa aproximadamente 25 lb (11 kg). Tenga cuidado al levantarlo.



limpieza

Limpie a mano regularmente con un paño húmedo y detergente suave solamente.

No utilice productos fuertes como cloro, lejía o limpiadores abrasivos.

mantenimiento

Drive Medical recomienda que el usuario revise visualmente este producto de forma periódica para asegurarse de que todas las piezas y accesorios estén bien sujetos y que todos los componentes funcionen bien y no estén desgastados, rotos, alterados o flojos. Revise con regularidad los tornillos y sujetadores del andador vertical Nitro Neuro y vuelva a apretarlos si es necesario. No debe haber ningún obstáculo o impedimento para el funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece no ser seguro o estar comprometido, no utilice el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite www.drivemedical.com/help para obtener más información.

Inspeccione periódicamente los componentes móviles del andador vertical Nitro Neuro para detectar signos de desgaste o daño. Pruebe el sistema de frenos a diario para asegurarse de que funcione correctamente.

Si tiene algún problema con la resistencia de las ruedas, el rendimiento de los frenos o el sistema de ajuste de los frenos de resistencia, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Drive o con el servicio al cliente de Drive para obtener ayuda.

Importante: No tire de los cables del freno. Si tira de los cables, puede que se retuerzan, estiren o dañen, lo que podría impedir que el sistema de frenos funcione correctamente. Los cables dañados deben reemplazarse de inmediato. Si el cableado se daña, deje de usar el andador y comuníquese con su distribuidor autorizado de Drive o con el servicio de atención al cliente de Drive para obtener asistencia.

instrucciones de seguridad

- Esta es solo una ayuda para caminar y no debe usarse como dispositivo de transporte.
- Utilícelo solo en superficies lisas y sólidas.
- Para evitar movimientos no deseados, mantenga siempre el control del andador vertical.
- El andador vertical Nitro Neuro no avanzará hasta que usted no suelte los frenos.
- Al activar o tirar de cualquiera de los mangos de los frenos, se desacoplará el freno, lo que permitirá que el andador vertical se desplace libremente. Asegúrese de que el usuario esté preparado y estable antes de liberar el freno.
- Peso máximo del usuario: 163 kg (360 lb).
- Revise con regularidad los tornillos y sujetadores del andador vertical Nitro Neuro y vuelva a apretarlos si es necesario.
- Use la bolsa solo para transportar objetos y no la sobrecargue. Carga máxima: 5 kg (11 lb).

- No exponga el producto a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) durante períodos prolongados, ya que esto puede hacer que las piezas del andador vertical Nitro Neuro se sobrecalienten y quemen al usuario.
- Asegúrese de que el andador vertical esté completamente abierto, que el asiento esté hacia abajo y que la barra plegable que se encuentra debajo del asiento esté trabada en la posición hacia abajo antes de usar el andador o sentarse en él.
- Asegúrese de que ambos agarres de mano estén a la misma altura. Pruebe la estabilidad del andador vertical antes de aplicar el peso total en los mangos para sentarse y pararse o en el apoyabrazos y los mangos.
- Reemplace las ruedas cuando estén significativamente desgastadas o dañadas.
- El respaldo está diseñado para proporcionar apoyo postural mientras el usuario está sentado. No está diseñado para soportar al usuario mientras está de pie ni para colgar ningún artículo.
- **NO MUEVA EL ANDADOR VERTICAL MIENTRAS ESTÉ SENTADO.**
- Consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar este producto para asegurarse de que sea adecuado para sus necesidades individuales.

garantía limitada de por vida

El producto de la marca Drive® tiene garantía contra defectos de materiales y mano de obra durante toda su vida útil para el comprador consumidor original.

Este dispositivo se fabricó de acuerdo con estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o al desgaste normal debido al uso. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como accesorios de goma, ruedas y agarres, que están sujetos al desgaste normal debido al uso y deben reemplazarse periódicamente.

Si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo Drive® o sobre esta garantía, comuníquese con un distribuidor de Drive® autorizado.



www.drivemedical.com

© 2026 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive and Nitro are registered trademarks of Medical Depot, Inc.

Sprint is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

© 2026 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive et Nitro sont des marques déposées de Medical Depot, Inc.

Sprint est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 États-Unis Fabriqué en Chine

© 2026 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

Drive y Nitro son marcas comerciales registradas de Medical Depot, Inc.

Sprint es una marca comercial de Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 EE. UU Fabricado en China